


- Führungsdrähte
- Guide wires
- Nitinol-Körbchen
- Nitinol baskets
- Drahtabschnitte
- Mandrels / Stylets
- Hypotube**
- Hypotube**
- Sonderprodukte
- Special products




ERflex hypotubes
MADE IN GERMANY

high quality
Hohe Qualität
standard dimensions on stock
Standardabmessungen ab Lager
high production safety
Hohe Produktionssicherheit

grinding profile Stylet Schleifkurve Stilett

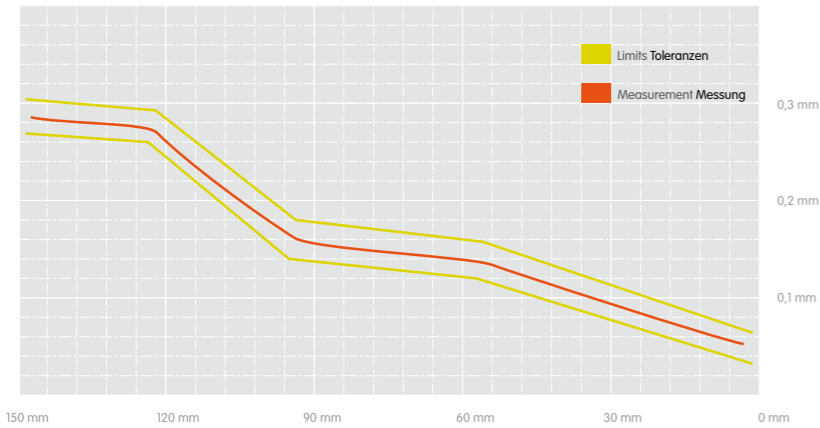

pressure test hypotube Druckprüfung Hypotube

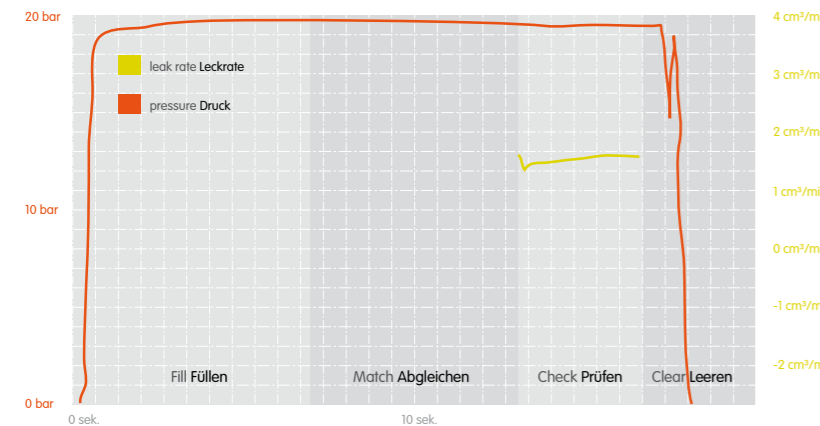

mit Stilett – zwei Schlitz
with Stylet – two slots

mit Stilett – ein Schlitz
with Stylet – one slot

mit Stilett – gepunktet
with Stylet – spot-welded

Skive – geschliffen
Skive – grinded

» passivieren der Schweißnaht möglich
» passivation of the welded joint possible

» Stilett ist individuell gestaltbar
» Stylet individually designable

types
Ausführungen

PTFE	uncoated
endless coated	bright
endlos beschichtet	blank
spray coated	
sprühbeschichtet	
dip coated	
tauchbeschichtet	

surfaces
Oberflächen

» Stainless-Steel
» Phynox
» Nitinol
» (CfK)

Markierungen
marks

sandgestrahlt
sandblasted

blank
bright

materials
Materialien

ends processing
Endenbearbeitung

Durchmesser diameter	Wanddicke wall thickness	Länge length
0,30 - 1,0 mm	0,04 - 0,15 mm	up to 1500 mm
.012" - .040" inch	.0015" - .006" inch	up to 60" inch

dimensions
Abmessungen



Durch langjährige Erfahrung in der Produktion von Hypotubes und einem hohen Automatisierungsgrad der Fertigung ist es EPflex möglich, hochwertige Hypotubes in einer konstant guten Qualität zu liefern. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten ist EPflex in der Lage, alle erforderlichen Varianten nach Kundenwunsch herzustellen.

Through many years of experience gained in the production of hypotubes and a high automation level in manufacturing, EPflex is able to provide premium hypotubes of continuous high quality. In cooperation with suppliers EPflex is capable of producing all necessary variations according to customer's request.


- special services:
Sonderleistungen:
- luer molding
 - Anspritzen Luer
 - special coatings
 - Sonderbeschichtungen
 - special colours
 - Sonderfarben
 - assemblies and joints
 - Montage und Klebearbeiten




DQS-Reg.Nr. 13536 MP23




DIN EN ISO 13485
MDD 93/42/EEC-II

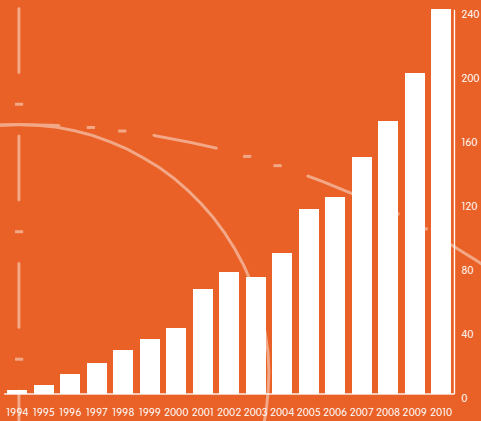

Mitarbeiter
Employees

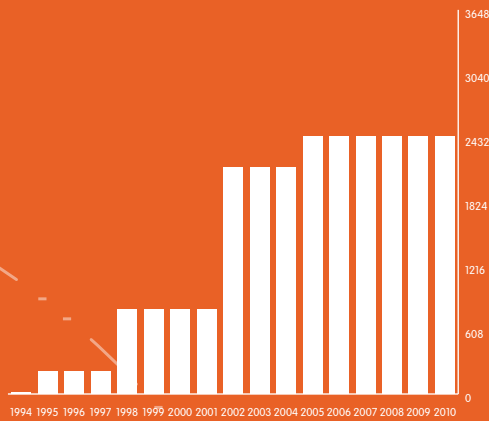


Produktionsflächen m²
Production space m²

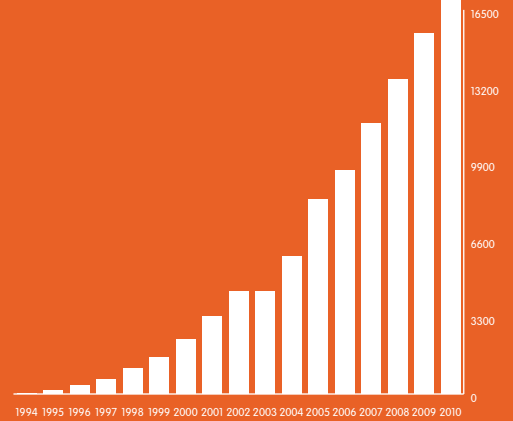

Umsatz TD Euro
Revenue TD Euro

EPflex ist seit 1994 als Hersteller flexibler medizinischer Metallkomponenten tätig. Wir sind ihr Ansprechpartner von der Entwicklung erster Prototypen bis zur Serienproduktion. Innovation und Kompetenz zeichnen uns als zuverlässigen Partner unserer Kunden aus.

Since 1994, EPflex has manufactured flexible metal components for medical applications. We are your one source for everything from the development of initial prototypes right up to volume production. Innovation and expertise are the characteristics which make us a reliable partner for our customers.

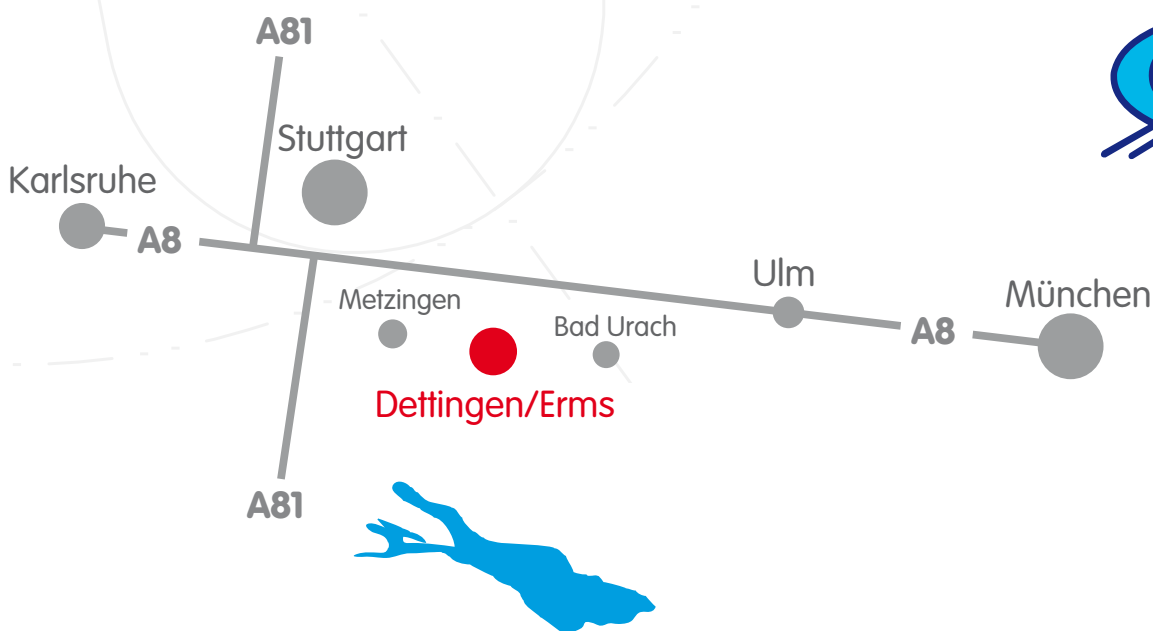

Entwicklung
Produktion
flexibler Elemente

EPflex Feinwerktechnik GmbH
72581 Dettingen/Erms
Im Schwöllbogen 24
Phone +49 (0) 7123 / 97 84-0
Fax +49 (0) 7123 / 97 84-22
E-Mail: info@epflex.com
www.epflex.com